

TuBo-Fix kleefvrij

Tweedelige fixatieband voor Endotracheale Tubes

TuBo-Fix is een fixatieband uit twee delen, voor tubes voor volwassenen, jongeren en schoolkinderen, gebruikt voor orale toepassingen.



TuBo-Fix is verkrijgbaar met een middenstuk in twee maten:

| | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| TuBo-Fix compleet | REF 20 - 10 | |
| TuBo-Fix nekband | REF 20 - 15 | |
| TuBo-Fix middenstuk-normaal | REF 20 - 11 | lengte 26 cm |
| TuBo-Fix middenstuk-extra lang | REF 20 - 12 | lengte 34 cm |

Voor een optimale fixatie en een vaste grip, is het noodzakelijk om de **witte** foam direct op de huid van de patiënt of op de tube te plaatsen! De Velcro® wordt op de **groene** zijde bevestigd. Het middenstuk kan worden vervangen. De fixatieband kan voor een langere periode worden gebruikt.

Novo-San geïmpregneerde reinigingsdoekjes in een dispenser doos:

| | | |
|-----------------|-------------|----------------------|
| Novo-San | REF 20 - 80 | 120 doekjes per doos |
|-----------------|-------------|----------------------|

Reinig de tubes voordat de plakstrip van Velcro® tape voor deze wordt vervangen. Dit zorgt voor een optimale hechting.

VOORDELEN

| | Patiënt | Verpleging | Inkoop | |
|--|---------|------------|--------|---------------------------------|
| een snelle en eenvoudige werkwijze | ● | ● | ● | |
| geen lijm – ideaal voor patiënten met een baard of snor en / of brandwonden | ● | ● | ● | |
| latex vrij – hypoallergeen, bacterieel neutraal, bescherming tegen decubitus | ● | ● | ● | |
| geringe materiaaldichtheid, slechts 30% komt in contact met de huid | ● | ● | | |
| erg stabiele fixatie – ideaal voor langdurig gebruik | ● | ● | | |
| kan eenvoudig op maat worden gemaakt – past bij alle patiënten | ● | ● | ● | ☒ = do not reuse |
| gebruikersvriendelijk ook als er handschoenen worden gedragen | | ● | | ☒ = latex-free |
| ook inzetbaar met dubbel lumen tubes en larynxmaskers | | ● | ● | ☀ = keep away from sunlight |
| sterilisatie is mogelijk b.v. door stoom bij 134 °C | ● | ● | ● | ☂ = keep dry |
| economisch geprijsd – middenstuk, fixatieband kan langer gebruikt worden | ● | ● | ● | 📖 = consult instruction for use |
| Made in Germany | ● | ● | ● | CE Made in Germany |



TuBo-Fix

Gebruiksaanwijzing

NOVO

Novo Klinik-Service Gml

metra

Metra helpt helpen!



Bevestig de fixatieband met de witte (katoenen zijde) om de nek van de patiënt. Knip de band, indien gewenst op maat.



Bevestig het kleefstrookje langs de binnenkant van het "middenstuk" of rond de tube. Gebruik voor het reinigen alstublieft **Novo-San**. De tube moet schoon, slijm-en vetvrij zijn.




Mogelijkheid A:
Draai het "middenstuk" eenmaal rond de tube.



Mogelijkheid B:
Draai het "middenstuk" via de perforatie om de tube.



Bevestig het "middenstuk" met de Velcro® strip op de fixatieband. Trek het geheel aan maar niet te strak! Aanpassen is erg eenvoudig en altijd mogelijk.

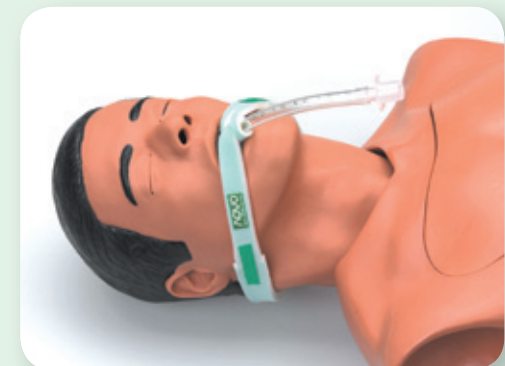

Volledige fixatie. Wanneer het "middenstuk" vies is geworden kan deze worden vervangen. De fixatieband kan echter voor een langere periode worden gebruikt.