

Betere
zorg,
betere
ergonomie!



Manuele transfer- hulpmiddelen



- + Liggend en zittend positioneren
- + Zittend en liggend transfereren
- + Rechtkomen, verplaatsen
en ondersteunen
- + Evacueren
- + Opleidingen

Ontdek al onze oplossingen op **metra.be**

+
Metra zorgt samen met u voor
betere zorg en ergonomie

Werken in de zorgsector is een roeping. Iedereen streeft naar optimale zorg, maximale autonomie en comfort voor de patiënt of bewoner. Door de vergrijzing is er een sterke evolutie naar een groter aandeel bewoners en patiënten met een grote zorgafhankelijkheid. Dat maakt werken in de zorg fysisch erg belastend en hieraan zouden zowel werkgevers als zorgverleners meer aandacht moeten schenken.

+
Ergonomisch werken beschermt de gezondheid van uw zorgmedewerkers
‘Manutentie’, het op de juiste wijze manueel verplaatsen van patiënten, krijgt in die context steeds meer aandacht en terecht. Het combineren van de juiste technieken met de juiste transferhulpmiddelen voorkomt immers (rug)klachten bij de zorgverleners.

+
Manuele transferhulpmiddelen verbeteren de zorg voor alle zorgontvangers
Bovendien verhoogt correct gebruik van deze hulpmiddelen aanzienlijk het comfort en de veiligheid van de zorgontvanger. Door de zorgontvanger op de juiste wijze van houding te laten wisselen, worden bovendien ook doorligwonden voorkomen.

+
Metra, uw one-stop ergonomisch specialist
Daarom verkiezen bijna alle vooraanstaande wereldmerken op vlak van manuele transferhulpmiddelen Metra als hun partner in België! In deze catalogus vindt u een overzicht van de oplossingen die wij aanbieden om te komen tot een betere zorg, met minder fysieke inspanningen! Samen met u screenen wij de zorgnood van uw bewoners of patiënten en inventariseren we de hulpmiddelen die hier kunnen toe bijdragen.

Onze service eindigt niet bij de levering. Wij maken er een punt van dat uw medewerkers de ingezette hulpmiddelen optimaal en in alle veiligheid kunnen gebruiken. Daarom bieden wij enkel oplossingen aan die steunen op de **4 METRA-pijlers**:

1.
Juist advies
en heldere
offerte
2.
Correcte
introductie
3.
Doorgedreven
opleiding
4.
Perfekte
dienst-na-
verkoop



© Metra bv
Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten.

inhoudstafel
Manuele transferhulpmiddelen

+ Liggend positioneren	4	+ Zittend transfereren	19
Glijzeil buisvormig HyperGlide Too	4	Transferplank Banana Prime	19
Glijzeil buisvormig HyperGlide	5	Transferplank Flexi Board Oval	20
Glijhandschoenen Mobiglide	5	Transferplank EasyGlide	20
Glijlaken enkelvoudig 4WaySheet	6	Draagstoel Alpha	21
Glijzeil buisvormig disposable Petermann	6	Draagstoel LiftSeat	21
Glijzeil/glijlaken ECO Slide Sheets	7		
WendyLett 2-delig glijsysteem	8	+ Rechtkomen en verplaatsen	22
WendyLett onderlaken of hoeslaken	8	Transferwagen Bea deluxe	22
WendyLett onderlaken	9	Transferwagen Mobi Pro Flexi II	23
WendyLett hoeslaken	9	Transferwagen ReTurn	24
WendyLett 2way of 4way steeklaken	10		
WendyLett 2way steeklaken	10	+ Ondersteunen	26
WendyLett 4way steeklaken	10	Transfergordel WalkingBelt	26
WendyLett Glij-kussensloop	11	Transfergordel EasyBelt en FlexiBelt	27
WendyLett Keuzehulp	11	Transfergordel ReadyBelt	28
RX hulpmiddel X-ray Crawler	11	PantLock	28
		Beengordel	28
		Transferband MagicBelt	29
		Transferband FlexiMove	29
+ Zittend positioneren	12	Draaischijf Turntable	29
Glijkussen AutoGlide	12	Oprichthulp FlexiGrip	30
Glijkussen AutoSlide	13	Voetensteun Alpha	30
Glijkussen buisvormig	13	Voetensteun FootStool	30
Glijkussen OneWaySlide	14	Been- & armsteun Nurse Assistant	31
Draaikussen TurnTableSoft	14		
		+ Evacueren	32
+ Liggend transfereren	15	Evacuatiemat	32
Transferbord Vision	15	Transfermatras	32
Transferbord EasyGlide	17	Draagstoel	32
Glijmatras EasySlide buisvormig	17	Evacuatiestoel	33
Transfermatras Alpha	18		
Transfermatras FlexiMove	18	+ Opleidingen	34



Wist je dat METRA een eigen lijn producten aanbiedt?
Deze herkent u aan het symbool links hiernaast.
De METRA producten werden ontwikkeld op basis van onze ervaring, in nauwe samenspraak met onze klanten.

+ Liggend positioneren

Een glijzeil, glijlaken, glijkussen of transferkussen onder de patiënt vermindert aanzienlijk de wrijvingsweerstand bij een transfer. De patiënt kan zo gemakkelijk in bed vergleden worden i.p.v. hem op te tillen. Dit zowel voor hogerop brengen, in wisselhouding leggen, zijwaarts verplaatsen, draaien naar zithouding of voor algemene positionering. Een glijzeil of glijlaken is ook een hulpmiddel bij het verplaatsen van een patiënt in of uit het bed, bij het wassen van een bedlegerig patiënt en het vermijden van doorligwonden.

Metra heeft een ruim gamma aan glijzeilen, -lakens en -kussens, in verschillende afmetingen, in functie van de specifieke noden qua gebruik en de mogelijkheden van de patiënt. Naast glijzeilen die kunnen gewassen worden op 80°, zijn er ook lakens voor éénmalig of patiëntgebonden gebruik om kruisbesmetting te voorkomen.



Glijzeil buisvormig HyperGlide Too

Buisvormig glijzeil, stevig weefsel met een zeer goede glijdcapaciteit door de lage wrijvingsweerstand. Verschillende afmetingen voor verschillende toepassingen beschikbaar.

- + Zeer hoog glijdvermogen
- + Combinatie met 'wisseldruk' of 'alternerende' matras
- + Voor wisselhouding, hogerop brengen of algemene positionering
- + Duurzame polyamide
- + Uitzonderlijk stevig



referentie	omschrijving (open zijde = glijrichting)	lengte cm / breedte cm / gebruik	
TLT7070	Glijzeil HyperGlide Too, buisvormig (70 cm)	70 / 70 / algemeen positioneren	80°
TLT10070	Glijzeil HyperGlide Too, buisvormig (100 cm)	100 / 70 / hogerop positioneren	80°
TLT70100	Glijzeil HyperGlide Too, buisvormig (70 cm)	70 / 100 / wisselhouding positioneren	80°
TLT100100	Glijzeil HyperGlide Too, buisvormig (100 cm)	100 / 100 / algemeen positioneren	80°
TLT13090	Glijzeil HyperGlide Too, buisvormig (130 cm)	130 / 90 / hogerop positioneren	80°


Glijzeil buisvormig HyperGlide

Buisvormig glijzeil, soepel en comfortabel weefsel met een uitzonderlijke glijdcapaciteit. Verschillende afmetingen voor verschillende toepassingen beschikbaar. Glijdt aan beide kanten, zodat het niet uitmaakt of het laken al dan niet binnenste buiten wordt gebruikt.



- + Uiterst hoog glijdvermogen
- + Duurzame polyamide
- + Voor wisselhouding, hogerop brengen of algemene positionering
- + Ultra dun

referentie	omschrijving (open zijde = glijrichting)	lengte cm / breedte cm / gebruik	
TLEM7070	Glijzeil HyperGlide, buisvormig (70 cm)	70 / 70 / algemeen positioneren	60°
TLEM10070	Glijzeil HyperGlide, buisvormig (100 cm)	100 / 70 / hogerop positioneren	60°
TLEM70100	Glijzeil HyperGlide, buisvormig (70 cm)	70 / 100 / wisselhouding positioneren	60°
TLEM100100	Glijzeil HyperGlide, buisvormig (100 cm)	100 / 100 / algemeen positioneren	60°
TLEM13070	Glijzeil HyperGlide, buisvormig (130 cm)	130 / 70 / hogerop positioneren	60°

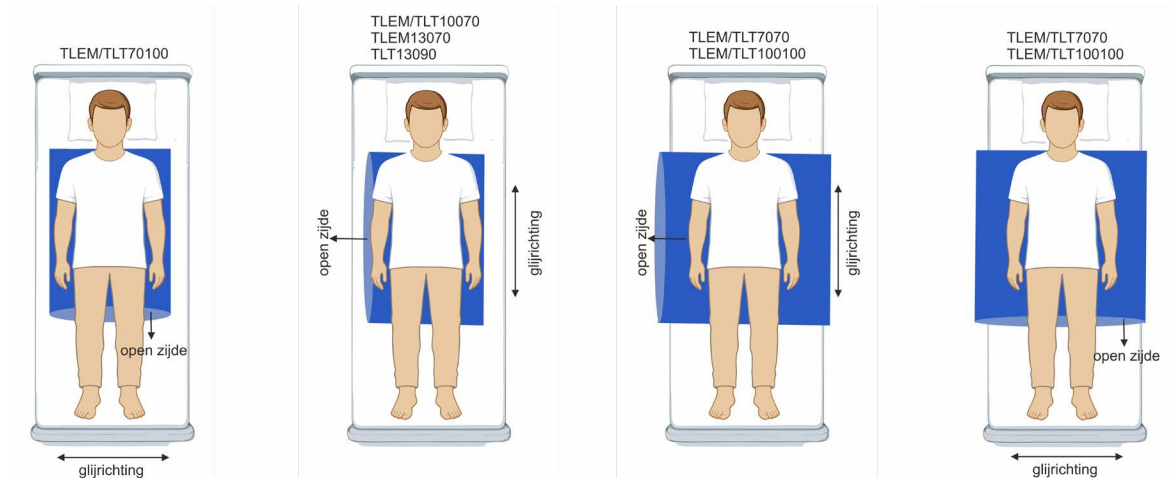

Glijhandschoen Mobiglide

De Mobiglide glijhandschoenen zijn een praktisch hulpmiddel voor het positioneren van patiënten in uiteenlopende zorgsituaties. Ze maken dagelijkse handelingen eenvoudiger, ergonomischer en comfortabeler voor zowel zorgverlener als patiënt.



- + Eenvoudig positioneren van de patiënt
- + Handen moeiteloos tussen patiënt en matras of kussens plaatsen
- + Ideaal voor kleine correcties van de lighouding
- + Geschikt voor het verschuiven en straktrekken van lakens
- + Te gebruiken om de werking van een drukverlagend zitkussen te controleren tijdens het zitten.

referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm / gebruik	
TLHM	Mobiglide glijhandschoenen (paar) - max 250 kg	50 / 20 / algemeen positioneren	70°

Glijlaken enkelvoudig 4WaySheet

Enkelvoudig glijlaken. Te gebruiken in combinatie met een steeklaken. De 4WaySheet blijft in bed liggen met het steeklaken erboven.

- + Zeer goede glijdcapaciteit
- + Voor wisselhouding, hogerop brengen of algemene positionering
- + Duurzame polyamide
- + Waterdicht (incontinentie)
- + Antislip onderkant en zijstroken



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm / gebruik	
4WS	Glijlaken 4 WaySheet, enkelvoudig	140 / 90 / algemeen positioneren	60°


+
TIP
+

Wat is een glijzeil, wat een glijlaken?
buisvormig = glijzeil
enkelvoudig = glijlaken

Glijzeil buisvormig disposable Petermann

Buisvormig glijzeil voor éénmalig gebruik, wat kruiscontaminatie vermijdt. Beschikbaar op een rol, waardoor steeds de gewenste lengte kan afgesneden worden.

- + Zeer goede glijdcapaciteit
- + Voor wisselhouding, hogerop brengen of algemene positionering
- + Waterdicht
- + Vervaardigd uit LDPE, latexvrij
- + Single Patient Use (SPU): kan bij dezelfde patiënt meerdere malen hergebruikt worden

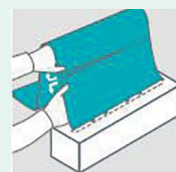

referentie	omschrijving (open zijde = glijrichting)	lengte m / breedte cm / gebruik
TLPMR60	Glijzeil disposable, rol (60 cm)	100 / 60 / algemeen positioneren
TLPMR70	Glijzeil disposable, rol (70 cm)	100 / 70 / algemeen positioneren
TLPMRD60	Glijzeil disposable, rol in dispenserdoos + mes (60 cm)	100 / 60 / algemeen positioneren
TLPMRD70	Glijzeil disposable, rol in dispenserdoos + mes (70 cm)	100 / 70 / algemeen positioneren
referentie	omschrijving	
TLPMRH60	Afroller tafelmodel voor TLPMR60	
TLPMRH70	Afroller tafelmodel voor TLPMR70	



Glijzeil / glijlaken ECO Slide Sheets



Duurzaamheid en verantwoordelijkheid nemen voor onze ecologische voetafdruk is een belangrijke waarde. Om de schoonheid, hulpbronnen en bewoonbaarheid van onze omgeving te behouden, is het belangrijk dat onze dagelijkse beslissingen de planeet positief beïnvloeden. Wij hebben, net als de meeste anderen, nog een lange weg te gaan om echt een verschil te maken, maar we kunnen trots zijn en zeggen dat we aan die reis zijn begonnen.

Vanuit deze waarden ontstond het concept van een milieuvriendelijk glijzeil.

De overstap van een standaard glijzeil voor eenmalig gebruik door patiënten naar ons ECO-assortiment is een stap in de goede richting als we kijken naar onze verantwoordelijkheden ten opzichte van de planeet. We geloven dat we in staat zijn om een assortiment glijdzeilen/glijdlaken aan te bieden dat consumenten de optie biedt om verantwoord te kiezen zonder in te boeten aan kwaliteit.

- + Latex vrij
- + Lushanger
- + Verkrijgbaar in verschillende maten
- + Siliconen coating met hoge glijdcapaciteit
- + Individueel verpakt in biologisch afbreekbaar materiaal
- + Gemaakt van gerecyclede polyethyleentereftalaatvezels (RPET), waardoor de ecologische voetafdruk wordt verkleind

referentie	omschrijving (open zijde = glijrichting)	lengte cm / breedte cm / gebruik	
DGF100200	Glijlaken ECO Slide Sheet enkelvoudig – 10 st/doos	200 / 100 / algemeen positioneren	☒
DGF100200H	Glijlaken ECO Slide Sheet enkelvoudig met handvatten – 10 st/doos	200 / 100 / algemeen positioneren	☒
DGF140200	Glijlaken ECO Slide Sheet enkelvoudig – 10 st/doos	200 / 140 / algemeen positioneren	☒
DGF140200H	Glijlaken ECO Slide Sheet enkelvoudig met handvatten – 10 st/doos	200 / 140 / algemeen positioneren	☒
DGT072072	Glijlaken ECO Slide Sheet buisvormig – 10 st/doos (72 cm)	72 / 72 / algemeen positioneren	☒
DGT072120	Glijlaken ECO Slide Sheet buisvormig – 10 st/doos (120 cm)	120 / 72 / hogerop positioneren	☒
DGT072150	Glijlaken ECO Slide Sheet buisvormig – 10 st/doos (150 cm)	150 / 72 / hogerop positioneren	☒
DGT072200	Glijlaken ECO Slide Sheet buisvormig – 10 st/doos (200 cm)	200 / 72 / hogerop positioneren	☒
DGT100100	Glijlaken ECO Slide Sheet buisvormig – 10 st/doos (100 cm)	100 / 100 / algemeen positioneren	☒
DGT100120	Glijlaken ECO Slide Sheet buisvormig – 10 st/doos (120 cm)	120 / 100 / hogerop positioneren	☒
DGT100200	Glijlaken ECO Slide Sheet buisvormig – 10 st/doos (200 cm)	200 / 100 / hogerop positioneren	☒
DGT140200	Glijlaken ECO Slide Sheet buisvormig – 10 st/doos (200 cm)	200 / 140 / hogerop positioneren	☒
DGT200070	Glijlaken ECO Slide Sheet buisvormig – 10 st/doos (70 cm)	70 / 200 / wisselhouding positioneren	☒
DGT200100	Glijlaken ECO Slide Sheet buisvormig – 10 st/doos (100 cm)	100 / 200 / wisselhouding positioneren	☒
DGT200140	Glijlaken ECO Slide Sheet buisvormig – 10 st/doos (140 cm)	140 / 200 / wisselhouding positioneren	☒


WendyLett 2-delig glijsysteem

Het WendyLett 2-delig glijsysteem is een combinatie van 2 onderdelen die samen zorgen voor veilig en comfortabele draaien en of positioneren in bed:

- 1 WendyLett onder- of hoeslaken
- +
- 2 WendyLett 2Way of 4Way steeklaken

Door deze combinatie kan de zorgvrager makkelijker draaien, hogerop geplaatst worden of comfortabel gepositioneerd worden met minder fysieke belasting voor de zorgverlener.

- + Makkelijker draaien in bed
- + Minder fysieke belasting voor zorgverleners
- + Veilig positioneren zonder valrisico
- + Minder wrijving op de huid
- + Ondersteunt preventie van decubitus
- + Te combineren met drukverlagende matrassen
- + Geen storende naden in het ligoppervlak
- + Max. 300 kg (200 kg bij de WendyLett 4Way met handgrepen)

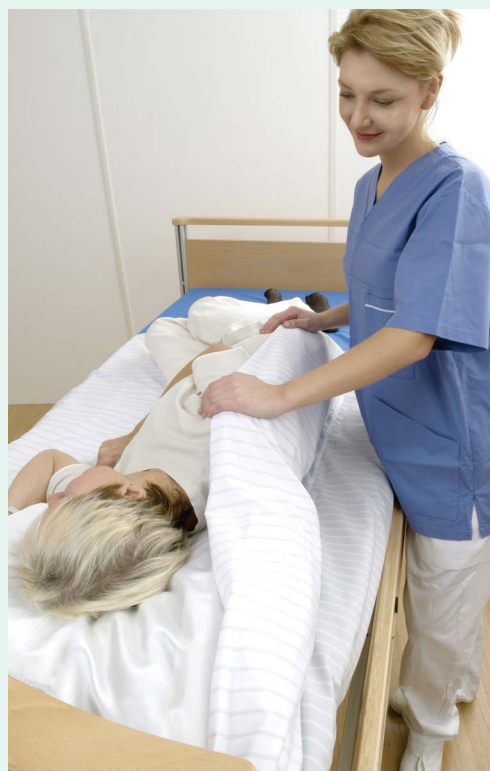

1. WendyLett onderlaken of hoeslaken

De WendyLett onder- en hoeslakens zijn ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met zelfstandig draaien in bed.



Het onderlaken wordt onder het matras ingestopt terwijl het hoeslaken een elastische band heeft rondom het matras deze blijft daardoor goed op zijn plaats (is geschikt voor matrassen tot 20 cm dik).

Het is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan de zijkant van het matras. Door te kiezen voor een onder- of hoeslaken dat niet helemaal doorloopt tot aan het voeteneinde, hebben mensen meer grip bij het voeteneinde waardoor zij hier beter kunnen afzetten met de voeten. Als het gladde satijn doorloopt tot aan het voeteneinde geeft dit nauwelijks wrijving waardoor er minder kans is op doorligwonden (ook) op de hielen.



ONDERLAKEN




HOESLAKEN




uitsparing voor
slang luchtwisselmatras

1 WendyLett onderlaken

140 cm lang glijvlak:
voor verlaging wrijving onder
heup en schouders
(voeten behouden grip om af te
kunnen zetten)

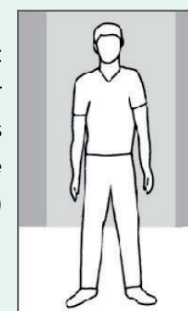

200 cm lang glijvlak:
voor verlaging wrijving onder
schouders, heup en voeten

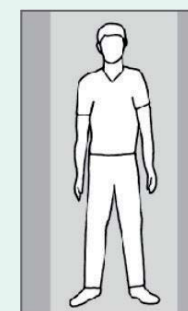

referentie	totale afmeting - glijvlak - kleur	matrasbreedte cm	
WL1629	WendyLett onderlaken 100 x 200 cm - 60 x 100 cm - grijs/wit	80-90	90°
WL1634	WendyLett onderlaken 140 x 200 cm - 60 x 140 cm - grijs/wit	80-90	90°
WL1639	WendyLett onderlaken 200 x 200 cm - 70 x 200 cm - grijs/wit	105	90°
WL1668	WendyLett onderlaken 140 x 220 cm - 100 x 140 cm - grijs/wit	120	90°
WL1669	WendyLett onderlaken 200 x 220 cm - 100 x 200 cm - grijs/wit	120	90°
WL1681	WendyLett onderlaken 200 x 370 cm - 70 x 200 cm - grijs/wit	2 pers.	90°




Voor gebruikers die moeite hebben met zelfstandig draaien in bed kan het onder- of hoeslaken het gewone beddengoed vervangen.




1 WendyLett hoeslaken

140 cm lang glijvlak:
voor verlaging wrijving onder
heup en schouders
(voeten behouden grip om af te
kunnen zetten)

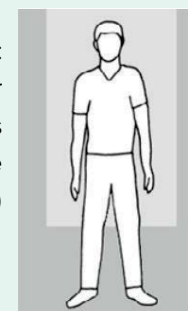

200 cm lang glijvlak:
voor verlaging wrijving onder
schouders, heup en voeten

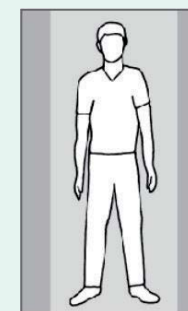

referentie	totale afmeting - glijvlak - kleur	matrasbreedte cm	
WL1601	WendyLett hoeslaken 90 x 200 cm - 60 x 140 cm - grijs/wit	90	90°
WL1641	WendyLett hoeslaken 90 x 200 cm - 70 x 200 cm - grijs/wit	90	90°
WL1651	WendyLett hoeslaken 105 x 200 cm - 80 x 200 cm - grijs/wit	105	90°
WL1661	WendyLett hoeslaken 120 x 200 cm - 95 x 200 cm - grijs/wit	120	90°
WL1671	WendyLett hoeslaken 140 x 200 cm - 110 x 200 cm - grijs/wit	140	90°
WL16911	WendyLett hoeslaken 90 x 215 cm - 70 x 200 cm - grijs/wit	90	90°

2. WendyLett 2Way of 4 Way steeklaken

Het WendyLett2Way-en 4Way steeklaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. Het steeklaken is gemaakt van speciaal geweven katoen wat comfortabel aanvoelt.

2 WendyLett 2Way steeklaken

- + Vervaardigt uit comfortabel katoen
- + Gemakkelijker te draaien in bed, eventueel met hulp
- + Schouder en/of heup dienen op het steeklaken te liggen
- + Maakt zitten met verhoogd hoofdeinde mogelijk zonder naar beneden te schuiven



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm	
WL1636	WendyLett 2Way steeklaken, grijs/wit	140 / 200	

2 WendyLett 4Way steeklaken

- + Satijnen onderzijde voor minimale wrijving
- + Gemakkelijk draaien en hoger op plaatsen in bed
- + Ideaal voor meer passieve zorgvragers
- + Beschikbaar in uitvoeringen met:
 - Incontinentiemateriaal (droog oppervlak)
 - Handgrepen, voor het draaien en positioneren m.b.v. een tillift (max. 200 kg)




referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm	
WL1637	WendyLett 4Way steeklaken, grijs/wit	140 / 200	
WL1647	WendyLett 4Way steeklaken, grijs/wit	200 / 200	
WL1648	WendyLett 4Way steeklaken, inco, grijs/wit	75 / 200	
WL1649	WendyLett 4Way steeklaken, inco + handgrepen, grijs / wit	140 / 120	
WL1657	WendyLett 4Way steeklaken, handgrepen grijs/wit	140 / 190	
WL1687	WendyLett 4Way steeklaken, handgrepen grijs/wit	140 / 260	
WL1652	WendyLett 4Way steeklaken, grijs/wit	140 / 260	
WL1692	WendyLett 4Way steeklaken, grijs/wit voorzien van extra stof voor zwaardere gebruikers	200 / 215	

WendyLean Glij-kussensloop

Deze kussensloop heeft een onderkant van glad satijn. Dit glijdt gemakkelijk over het WendyLett hoeslaken waardoor het hoofd en de schouders van de gebruiker mee omhoog schuiven als u uw hoofdeinde omhoog zet. Hierdoor wordt de gebruiker minder in elkaar gedrukt wat het comfort ten goede komt. Helpt tevens decubitus op de oorschelp voorkomen.



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm
WL1680	WendyLean	50/ 60

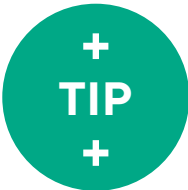

WendyLett Keuzehulp

Met de WendyLett keuzehulp bepaalt u eenvoudig de juiste combinatie van 1 en 2 . Scan de QR-code en doorloop het korte stappenplan om snel de juiste oplossing voor uw zorgsituatie te vinden.



[Klik hier](#)

RX hulpmiddel X-Ray Crawler

Dit hulpmiddel werd speciaal ontworpen voor bedlegerige patiënten die een radiologisch onderzoek moeten ondergaan. Het voorkomt dat een patiënt moet opgetild worden zodat deze handeling veel aangenamer is voor de patiënt en de zorgverlener minder fysiek belast wordt. Het innovatieve concept van de roterende X-Ray Crawler vergemakkelijkt en versnelt het inschuiven van de röntgencassette onder de patiënt. Om aan de hoogste hygiënische eisen te voldoen, kan de X-Ray Crawler eenvoudig worden gedesinfecteerd. De X-Ray Crawler SET biedt ook een wegwerpbeschermingsfolie voor de röntgencassette.



- + Vermindert de inspanning bij de patiënt en de hulpverlener
 - + Max 200 kg
 - + Radiotransparant
- + Reinigen met een vochtige doek
 - + Ontsmetten met desinfectie of ontsmettende doekjes
 - + Polyamide, latex vrij
 - + Wegwerpbeschermingsfolie

referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm	
PMF8260	X-Ray Crawler	41 / 53,5	
PMF8265	X-Ray Crawler SET, 2 x PMF8260 + PMF8261	41 / 53,5	

+ Zittend positioneren


Ook bij het bewegen van sta- naar zitpositie, in/uit een zetel, in/uit de auto ... zorgen transferhulpmiddelen, door het sterk reduceren van de wrijvingsweerstand, voor meer comfort, autonomie en veiligheid bij de gebruiker en voor minder belasting bij de zorgverlener. Metra biedt verscheidene oplossingen aan, in functie van de noden en de specifieke mogelijkheden van de persoon in kwestie.



Glijkussen AutoGlide

Een glijkussen dat het in- en uitstappen in de wagen vergemakkelijkt. Als er niet op eigen kracht in het midden van de autozetel kan plaats genomen worden, is de AutoGlide de ideale hulp om in de juiste positie te verglijden. De AutoGlide bestaat uit 2 delen die zeer makkelijk t.o.v. elkaar glijden. De handvatten kunnen gebruikt worden om te helpen bij de transfer.

- + Ideaal hulpmiddel om in en uit de wagen te stappen
- + Met afstandswaarsel voor extra zitcomfort
- + Ook voor autonoom gebruik (zonder externe hulp)

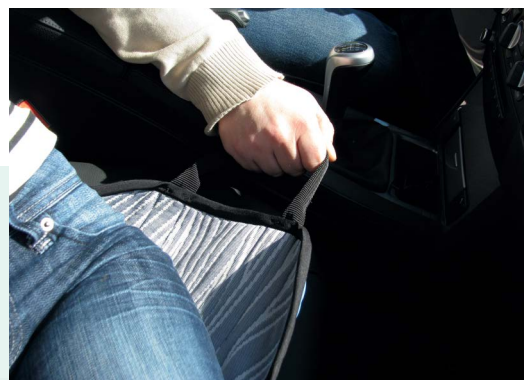

referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm	
AG	Glijkussen AutoGlide	46 / 44	60°

Glijkussen AutoSlide

In auto's stappen kan moeilijk en onhandig zijn, maar eenmaal erin zijn ze voor veel mensen de sleutel tot vrijheid. De AutoSlide werd ontwikkeld om gemakkelijker in auto's te stappen en een comfortabele houding aan te nemen. Het buitenoppervlak en de riemen zijn gemaakt van polyester. De binnenkant is gemaakt van ULF (Ultra Low Friction).



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm	
AS	Glijkussen AutoSlide	46 / 44	60°

Glijkussen EasySlide buisvormig

De EasySlide is een compact en praktisch glijhulpmiddel dat het positioneren en verplaatsen van personen in bed aanzienlijk vergemakkelijkt. Ideaal voor het draaien in bed, het hogerop plaatsen van de gebruiker of het uitvoeren van transfers van bed naar rolstoel. Dankzij het gladde, frictieverlagende materiaal wordt de wrijving ter hoogte van schouders en heupen sterk verminderd. Dit verhoogt het comfort van de gebruiker en helpt het risico op huidirritatie en drukletsels te beperken.

- + Comfortabele en zachte ondersteuning bij het draaien en verplaatsen
- + Vermindering van wrijving op gevoelige zones zoals schouders en heupen
- + Stimuleert actieve deelname waar mogelijk
- + Efficiëntere en veiligere positioneringen



referentie	omschrijving (open zijde)	lengte cm / breedte cm	
TK5060N	EasySlide	60 / 50	80°

Zie ook pag. 17 voor de afmetingen 190 / 60 cm, andere afmetingen op aanvraag.

Glijkussen OneWaySlide

Met behulp van de OneWaySlide kunt u iemand in een comfortabeler positie in een (rol)stoel helpen. Het buisvormig kussen glijdt makkelijk achteruit, maar houdt voorwaartse bewegingen juist tegen. De OneWaySlide is voor actievere gebruikers voor minder actieve gebruikers is er een versie met handvatten, waarmee u iemand met een simpele handeling in een betere positie kunt trekken.

- + Comfortabel door het zachte, gewatteerde oppervlak
- + Het oppervlak verhindert dat de gebruiker naar voren glijdt
- + Gemaakt van polyester en polyethyleen en glijdt makkelijk door toepassing van het unieke materiaal Ultra Low Friction (ULF)



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm	
OWSS	Glijkussen OneWaySlide buisvormig	50 / 40	
OWS	Glijkussen OneWaySlide buisvormig	50 / 45	
OWS13040	Glijkussen OneWaySlide met 6 handgrepen	130 / 40	

Draaikussen TurnTableSoft

TurnTableSoft maakt het eenvoudiger om te draaien tijdens het zitten op het bed of op een stoel.

TurnTableSoft wordt gemaakt van twee ronde schijven met weerstandsverlagend materiaal aan de binnenzijde, waardoor de schijven zacht over elkaar heen kunnen schuiven.

- + Ideaal hulpmiddel om zittend te draaien



Klik hier

referentie	omschrijving	diameter cm	
DSTTS45	TurnTableSoft	45	

+ Liggend transfereren

Een transferbord is, door zijn groot glijdvermogen en beperkt gewicht, een ideaal hulpmiddel voor het uitvoeren van een liggende transfer, waarbij een klein hoogteverschil of een beperkte open ruimte moet overbrugd worden, bijv. van bed naar operatietafel. De transfer gebeurt op een veilige, comfortabele en ergonomische manier, zowel voor zorgverlener als patiënt. De transferborden zijn radiotransparant en beschikbaar in verschillende afmetingen, met/zonder waterdichte hoes of hoes voor éénmalig gebruik. Een transfermatras zorgt voor een extra comfortabel gevoel en is ook geschikt voor een liggende transfer over kleine oneffenheden.

Transferbord Vision

Een superlicht, radiotransparant en vouwbaar transferbord met hoes. Ontworpen voor een optimaal glijdvermogen en patiëntencomfort van top kwaliteit, vorm en functie. De Vision is bij uitstek geschikt voor atraumatische en pijnloze laterale transfers met verminderde wrijving van zittende of liggende patiënten.

- + Heel licht, snel inzetbaar
- + Flexibel over de gehele lengte
- + Beschikbaar in meerdere afmetingen
- + Grotere modellen zijn vouwbaar, dus compact om te dragen en op te bergen
- + Extra hoes (PEM, disposable, SPU) verkrijgbaar ter voorkoming van kruisbesmetting
- + Radiotransparant
- + Max 200 kg (bij een opening tussen 2 bedden van max. 15 cm)



Ontdek hoe het werkt



Klik hier



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm	hoes
TBV9550V	Vision, vouwbaar, met rode textiel hoes	95 / 50	
TBV9550	Vision, niet vouwbaar, met rode textiel hoes	95 / 50	
TBV15060V	Vision, vouwbaar, met rode textiel hoes	150 / 60	
TBV15060	Vision, niet vouwbaar, met rode textiel hoes	150 / 60	
TBV18050R	Vision, vouwbaar, met rode textiel hoes	180 / 50	
TBV19550R	Vision, vouwbaar, met rode textiel hoes	190 / 50	
TBV9055VP	Vision, vouwbaar, met PEM Disposable Cover op rol	95 / 50	
TBV9550P	Vision, niet vouwbaar, met PEM Disposable Cover op rol	95 / 50	
TBV15060VP	Vision, vouwbaar, met PEM Disposable Cover op rol	150 / 60	
TBV15060P	Vision, niet vouwbaar, met PEM Disposable Cover op rol	150 / 60	
TBV18050P	Vision, vouwbaar, met PEM Disposable Cover op rol	180 / 50	
TBV19550RP	Vision, vouwbaar, met PEM Disposable Cover op rol	195 / 50	
TBVNG8545	Vision Ambulance Neo Genius, vouwbaar met rode textiel hoes	85 / 45 x2	
TBV8545	Vision Ambulance Neo, vouwbaar met rode textiel hoes	85 / 45	
TBVD18065	Vision, vouwbaar met handvatten en rode textiel hoes	180 / 50	
TBV8545H	Vision rode textiel hoes voor TBV(NG)8545	85 / 45	
TBV9550H	Vision rode textiel hoes voor TBV9550(V/P)	95 / 50	
TBV15060H	Vision rode textiel hoes voor TBV15060(V/P)	150 / 60	
TBV18050HR	Vision rode textiel hoes voor TBV18050(R/P)	180 / 50	
TBV19550HR	Vision rode textiel hoes voor TBV19050(R/RP)	190 / 50	
TBV9055DH	Beschermfolie Vision, 110 stuks op rol - geperforeerd	95 / 54,5	
TBV18055DH	Beschermfolie Vision, 55 stuks op rol - geperforeerd	180 / 54,4	
TBV8545PH	PEM disposable cover Vision, 50 stuks in dispenser	85 / 47,5	
TBV9055PH	PEM disposable cover Vision, 120 stuks op rol - geperforeerd	90 / 53	
TBV15060PH	PEM disposable cover Vision, 70 stuks op rol - geperforeerd	150 / 61	
TBV18050PH	PEM disposable cover Vision, 60 stuks op rol - geperforeerd	180 / 53	



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm / diepte cm
TBVDHWR	Wandrek voor Vision PEM of beschermfolie rol	46 / 70 / 18
TBVWR	Wandrek voor transferbord Vision	75 / 45 / 9

Transferbord EasyGlide

EasyGlide, een extra lange glijplank voor liggende transfers, maar ook voor het hogerop in bed plaatsen en draaien in bed.



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm
TPEG12060	Transferbord EasyGlide	120 / 60



Zorg voor duidelijk commando's als "trekken" of "duwen" als 2 zorggevers samenwerken.

Glijmatras EasySlide buisvormig

EasySlide wordt hoofdzakelijk gebruikt voor liggende transfers, bijvoorbeeld tussen bedden en röntgentafels of operatietafels, douches, brancards e.d. EasySlide is ook een erg effectief hulpmiddel om een zorgvrager in bed of op een röntgen- of operatietafel om te draaien. Disposable covers voor EasySlide zorgen voor een verbeterde hygiëne en minder wasgoed.



Lichte transfers, voor de zorgvrager én de zorgverlener

Uniek glijmateriaal, ULF (Ultra Low Friction), aan de binnenkant van de glijmatras, reduceert frictie en maakt het mogelijk voor zorgverleners om zorgvragers op bijna elke ondergrond, met een minimum van kracht, te verplaatsen. Zonder onnodige tilhandelingen.

- + Zachte, gevulde buitenkant zorgt voor comfortabele transfers.
- + Het ULF glijmateriaal reduceert de frictie onder de zorgvrager.
- + Beschermhoesjes en wegwerphoesjes zijn beschikbaar als toebehoor.
- + Verwijderbare beschermhoes van carbon vezel reduceert statische elektriciteit.

referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm
TK19060	Glijmatras EasySlide buisvormig	190 / 60
TK19060H	Glijmatras EasySlide polyester beschermhoes rood	190 / 60
TK19060DH	Glijmatras EasySlide disposable hoes rol (per 2 stuks)	2 x 50 units



Zie ook p. 13 voor de afmeting 50 x 60 cm.

Transfermatras Alpha

Met de transfermatras Alpha kan een patiënt gemakkelijk hogerop gebracht worden in bed of in wisselhouding. Ook kan een patiënt van het bed naar een douchebrancard getransfereerd worden of een gevallen patiënt opgetild worden. Het optillen kan door verschillende personen samen gebeuren waardoor de rug veel minder belast wordt.



Ontdek hoe het werkt




Klik hier

referentie	omschrijving	draagvermogen / materiaal / toelichting	
PMAST11	Transfermatras Alpha 4 handgrepen 110 x 53 cm	200 kg / nylon / transferhulpmiddel en evacuatie, radiotransparant	
PMAST15	Transfermatras Alpha 6 handgrepen 150 x 53 cm	200 kg / nylon / transferhulpmiddel en evacuatie, radiotransparant	

Transfermatras FlexiMove

FlexiMove is voornamelijk bedoeld voor het zijwaarts en omhoog positioneren in bed. In dit soort situaties is trekken makkelijker dan tillen en met de gladde onderkant van de FlexiMove kan de zorgvrager eenvoudig in de gewenste richting getrokken worden. Als het tillen niet vermeden kan worden, kan FlexiMove gebruikt worden voor zowel zittende als voor liggende transfers.

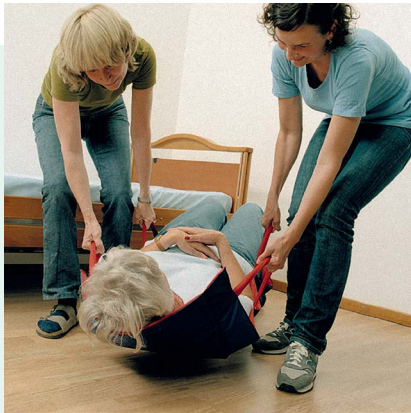

referentie	omschrijving	draagvermogen / materiaal / toelichting	
FM53110	Transfermatras FlexiMove 4 hangrepen 112 x 53 cm	150 kg / nylon / transferhulpmiddel en evacuatie	
FM53150	Transfermatras FlexiMove 6 handgrepen 152 x 53 cm	150 kg / nylon / transferhulpmiddel en evacuatie	



+ Zittend transfereren

Een transferplank is een ideaal hulpmiddel voor een zittende transfer waarbij een klein hoogteverschil of een open ruimte moet overbrugd worden, bijv. tussen bed, rolstoel, stoel, toilet, enz. Het gladde bovenvlak maakt de transfer makkelijker. De onderzijde voorzien is van een antisliplaag voor een grotere veiligheid. Beschikbaar in verschillende afmetingen. Wordt vaak gebruikt in combinatie met een draaischijf voor staand draaien en een transfergordel (zie verder). Een transferkussen zorgt voor een extra comfortabel gevoel en is ook geschikt voor een zittende transfer over kleine oneffenheden.



“Onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bewegingsvrijheid voor mensen met speciale behoeften.”

Transferplank Banana Prime

Deze zittende transferplank is geschikt voor gebruikers met voldoende arm- en bovenlichaamkracht om transfers zelfstandig of met beperkte hulp uit te voeren. De plank ondersteunt veilige verplaatsingen van bed naar rolstoel, stoel naar toilet of tussen zetel/stoel.

Dankzij de gepatenteerde gebogen vorm zijn zowel rechte als zijwaartse transfers soepel en gecontroleerd. De aflopende randen zorgen voor een eenvoudige plaatsing en verwijdering.

- + Eenvoudig schoon te maken
- + Slijtvast en duurzaam materiaal
- + Lichtgewicht, makkelijk vast te houden en te dragen
- + Ondersteunt zelfstandig bewegen
- + Dunne, aflopende randen voor eenvoudige plaatsing onder de gebruiker



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm
TPBP	Transferplank Banana Prime	62 / 26



Transferplank Flexi Board Oval

Alpha Flexi Board Oval is verkrijgbaar in twee maten en wordt gebruikt voor het verplaatsen en herpositioneren van zorgvragers. De TPPM8540 is geschikt voor horizontale transfers, positionering in bed en het aanbrengen van tilbanden. De TPPM4620 wordt gebruikt voor positionering in een (rol)stoel en het aanbrengen van tilbanden.

De ovale vorm en het dunne, wrijvingsarme materiaal maken het eenvoudig om het bord onder de gebruiker te plaatsen en te verwijderen. De ergonomische handgrepen zorgen voor een goede grip tijdens gebruik en kunnen ook dienen als ophangpunt, bijvoorbeeld aan het bed, zodat het bord altijd binnen handbereik is.



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm	
TPPM4620	Transferplank Flexi Board Oval (paar)	46 / 20	
TPPM 8540	Transferplank Flexi Board Oval (paar)	85 / 40	



Zorg bij een transfer met een transferplank dat het oppervlak waar naartoe gegleden wordt, zich wat lager bevindt en gebruik zo de zwaartekracht als extra hulpmiddel.

Transferplank EasyGlide



EasyGlide wordt gebruikt voor transfers tussen rolstoel, bed, toilet, autostoel en andere zitposities. Het is ideaal om kleine hoogteverschillen en korte afstanden te overbruggen.

EasyGlide Mini wordt per paar gebruikt om zorgvragers makkelijker verder achterin de stoel te laten zitten. Door het compacte formaat zijn de glijplanken eenvoudig onder het zitvlak te plaatsen, waardoor verplaatsen met minder wrijving zelfstandig of met hulp kan gebeuren.

EasyGlide Oval is een ovale glijplank voor liggende transfers tussen bedden en voor hoger positioneren in bed. Ze is ook geschikt voor het aanbrengen van tilbanden in bed of stoel en is eenvoudig te reinigen.



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm	
TPEG6033	Transferplank EasyGlide 3-delig (stuk)	60 / 33	
TPEG7533	Transferplank EasyGlide 3-delig (stuk)	75 / 33	
TPEG6025	Transferplank EasyGlide (stuk)	60 / 25	
TPEG4520	Transferplank EasyGlide Mini (paar)	45 / 20	
TPEG8539	Transferplank EasyGlide Oval (stuk)	85 / 39	

Draagstoel Alpha

De draagstoel Alpha is een ideaal hulpmiddel voor een gecontroleerde transfer van personen op trappen en andere situaties waar geen ruimte is voor mechanische hulpmiddelen. Het gewicht van de patiënt kan verdeeld worden over 5 zorgverleners, zelfs van verschillende lengtes.



referentie	omschrijving	draagvermogen / materiaal / toelichting	
PMADS	Draagstoel Alpha 5 handgrepen met zitgordel	180 kg / polyamide / handgrepen met speciale greephouders voor stevige grip	



Draagstoel LiftSeat

De LiftSeat is handig op reis, bijvoorbeeld als iemand in en uit een bus of vliegtuig moet geholpen worden. De gebruiker wordt handmatig in een zittende positie getild. De LiftSeat is ook geschikt om mensen te evacueren.



referentie	omschrijving	draagvermogen / materiaal	
DSLMS	Draagstoel LiftSeat gescheiden beensteunen S/M	150 kg / polyester	
DSLSL	Draagstoel LiftSeat gescheiden beensteunen L/XL	150 kg / polyester	

+
Rechtkomen
en verplaatsen

Opstahulpmiddelen helpen om op te staan en weer te gaan zitten wanneer dat voor de persoon steeds moeilijker wordt. Bijvoorbeeld bij transfers van/ naar het toilet, de (rol)stoel en zetel. De hulpmiddelen zijn zodanig ontworpen dat de patiënt of bewoner gestimuleerd wordt om de eigen kracht maximaal te benutten. Ze ondersteunen immers het natuurlijke bewegingspatroon bij het rechtkomen en terug gaan zitten. Ze kunnen ook worden gebruikt voor (kleine) verplaatsingen. Ook hier kan de zorgverlener de juiste ondersteuning bieden zonder fysiek belast te worden en met maximaal comfort voor de zorgontvanger.



“Een transferwagen helpt bij het revalideren van patiënten in een zorginstelling of tijdens een transfer. De patiënt kan zijn balans verbeteren bij het zitten en opstaan. Het biedt een veilige ondersteuning.”

Transferwagen Mobi Pro Flexi II

De Mobi Pro Flexi II is een ergonomisch en compact transferhulpmiddel dat ondersteuning biedt bij het veilig verplaatsen van zorgvragers met beperkte beenkracht en voldoende rompbalans. Het hulpmiddel is ideaal voor vroege mobilisatie en helpt bij transfers van bijvoorbeeld bed naar stoel of toilet. Dankzij het doordachte en compacte ontwerp kan één zorgverlener de zorgvrager efficiënt begeleiden bij het opstaan en tijdens korte verplaatsingen. De verstelbare, gepolsterde kniesteun en de antislip voetenplank zorgen voor stabiliteit, comfort en een veilige houding tijdens de transfer.



- + Ondersteunt zitten-naar-staan transfers
- + Verstelbare kniesteun met zachte polstering
- + Antislip voetenplank voor stabiele positionering
- + Draaibare zitsteunen voor verplaatsing in zittende houding
- + Mechanische pootspreiding met voetpedalen voor extra stabiliteit
- + Max 180 kg

referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm / hoogte cm
TWMPFII	Transferwagen Mobi Pro Flexi II	90,5 / 62 / 102



Mechanische pootspreiding met voetpedalen Verstelbare kniesteun en draaibare zitsteun Antislip voetenplank

Transferwagen Bea deluxe

De Bea deluxe is een overall inzetbaar opsta- en transferhulpmiddel voor personen die nog kunnen rechtstaan, maar moeite hebben met het stappen. Tijdens het vervoer bestaat ook de mogelijkheid om te gaan zitten. De Bea deluxe is voorzien van wegdraaibare zitvlakken en een flexibel opgehangen kniesteun. Het onderstel kan gespreid worden zodat zowel toilet als brede rolstoel gemakkelijk kunnen benaderd worden.

- + Voor staande en zittende transfers
- + Wegdraaibare zitschalen
- + Geremde achterwielen
- + Flexibele scheensteun
- + Gebruiksvriendelijk zonder elektronica
- + Antislip voetenplank
- + Bruikbaar in natte ruimtes
- + Onderstel kan gespreid worden
- + Max 160 kg



“geen elektronica
dus lage exploitatiekosten”

referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm / hoogte cm
EMBDL	Opsta- en transferhulpmiddel Bea deluxe	108 / 69,5 / 113



+
IN DE
KIJKER!
+

Opstahulpmiddelen of transferwagens helpen mensen bij opstaan op eigen kracht. De gebruiker blijft diverse spiergroepen gebruiken, wat instandhouding van kracht en evenwicht stimuleert. Transferwagens zijn geschikt voor mensen in de actieve mobiliteitsklasse. Om een transferwagen te kunnen gebruiken, moeten de sta-functie en rompbalans van de zorgvrager voldoende zijn.

Transferwagen ReTurn

Actieve en veilige transferhulp

De **ReTurn** ondersteunt zorgvragers veilig bij het **opstaan en verplaatsen** naar bijvoorbeeld een **bed, rolstoel of toilet**.

Het hulpmiddel stimuleert een **actieve transfer**, waarbij de zorgvrager zoveel mogelijk zelf meewerkt. Dit bevordert niet alleen de mobiliteit, maar maakt de transfer ook **veiliger en ergonomischer voor de zorgverlener**.

Dankzij de **soepele wielen** en de **kleine draaicirkel** is de ReTurn zeer wendbaar, zelfs in kleinere ruimtes. De rolstoel hoeft bijvoorbeeld niet altijd naast het bed te staan.

Daarnaast kan de ReTurn ook gebruikt worden om een zorgvrager **verder naar achteren in de stoel te positioneren**.



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm / hoogte cm / opstaphoogte cm / eigen gewicht
TWRT7500	Transferwagen ReTurn 7500i - max. 150 kg	68,5 / 57 / 115 / 4 / 16,5 kg
TWRT7400	Transferwagen ReTurn 7400 - max. 150 kg	68,5 / 57 / 99,5 / 4 / 16,5 kg
TWRT7600	Transferwagen ReTurn 7600 - max. 205 kg	79,5 / 67 / 121 / 4,5 / 26 kg
TWRTB	ReTurnBelt voor ReTurn 7500i	XXS <> XXXL
TWRTHS	HeelStrap voor ReTurn 7500i en ReTurn 7400	
TWRTPAD1	Padding voor kniesteunen voor ReTurn 7500i en ReTurn 7400	
TWRTPAD2	Padding voor kniesteunen voor ReTurn 7600	
TWRTBAG	Bag voor ReTurn 7500i, 7400	

Drie modellen

De ReTurn is verkrijgbaar in **drie modellen**, ontworpen voor eenvoudig manoeuvreren en gebruik in beperkte ruimtes.



ReTurn 7500i heeft een opstabeugel op standaardhoogte, geschikt voor de meeste volwassenen. Bevat een opening in de ladder om de ReTurnBelt eenvoudig te bevestigen.



ReTurn 7400 heeft een lagere opstabeugel die geschikt is als opstahulp voor kleinere volwassenen en voor kinderen. Dit hulpmiddel werkt ook goed in speciale zorgsituaties, zoals op röntgenafdelingen.



ReTurn 7600 Voor gebruikers tot 205 kg. Grotere voetplaat voor extra ruimte en stabiliteit. Beschikt over aangepaste onderbeensteunen en een hogere en bredere ladder voor grotere en zwaardere gebruikers.

ReTurn7500i en ReTurn7400 hebben dezelfde basisplaat, waardoor wisselen tussen de hogere en lagere opstabeugel als opstahulp mogelijk is.

- + Draaibare beensteunen voor optimale positionering van elke gebruiker
- + Compact en wendbaar – ideaal voor kleine ruimtes
- + Beschermende transporttas voor opslag en transport
- + Kan snel gemonteerd en gedemonteerd worden, wat transport en opslag eenvoudig maakt.

Accessoires voor extra veiligheid en ondersteuning



ReTurnBelt Ondersteunt het werk van de verzorger bij het helpen van de gebruiker tot een staande positie.



ReTurn HeelStrap Ondersteuning om de voeten van de gebruiker in de juiste positie te houden

+ Ondersteunen

Dit omvat de transferhulpmiddelen die de gebruiker ondersteunen bij het rechtekomen, draaien en staan. Een transfergordel en -sling zorgen ervoor dat zorgverlener en -ontvanger bij elkaar ideale grip vinden zonder aan kleren of ledematen te moeten trekken. De kracht wordt overgezet op plaatsen die meer verantwoord zijn m.b.t. ergonomie en comfort (bijv. kort bij het bekken i.p.v. onder de oksels). De zorgverlener kan een ergonomische houding behouden bij het ondersteunen van de zorgontvanger. Een draaischijf is een ideaal hulpmiddel voor personen die nog kunnen staan maar moeilijk te been zijn. Door het gebruik ervan worden knie-, enkel- en heupgewrichten veel minder belast. De voeten van de zorgontvanger worden op de draaischijf geplaatst en nadat hij is rechtgekomen (al dan niet met ondersteuning) kan hij gedraaid worden zonder zijn voeten te verplaatsen. Opricht hulpen helpen om van lig- naar zithouding te gaan in bed, of om recht te komen vanop de grond.



Transfergordel WalkingBelt

Unieke steun voor kinderen bij loopoefeningen. Met de WalkingBelt geeft u kinderen steun en stabiliteit bij loopoefeningen. De WalkingBelt ondersteunt het bovenlichaam en blijft goed zitten door het opgevulde beenharnas. Een groot voordeel is dat het kind de armen vrij kan bewegen.

- + Buitenkant vervaardigd uit 100% polyamide met PU-coating
- + Binnenkant uit antislipmateriaal



referentie	omschrijving	lengte cm / aanbevolen gewicht
TGWBXXS	Transfergordel WalkingBelt XXS	60 cm / 0-25 kg
TGWBXS	Transfergordel WalkingBelt XS	70 cm / 20-35 kg



Transfergordel EasyBelt en FlexiBelt

Met deze tranfergordel kunt u iemand vanuit zit helpen opstaan of ergens anders te gaan zitten. U kunt dit hulpmiddel ook gebruiken om steun te geven bij het lopen. U heeft stevige grip in verschillende situaties, doordat de riem zowel verticale als horizontale handvatten heeft. U kunt de transfergordel makkelijk combineren met andere hulpmiddelen voor mensen die meer hulp nodig hebben.



- + Sterke en veilige gesp die makkelijk sluit en opent
- + Stevige justeerband die eenvoudig is aan te passen
- + De buitenkant is gemaakt van slijtvaste nylon voor maximale levensduur
- + Stevig afgewerkte randen verlengt de levensduur
- + Op gevoelige plekken zijn de zomen versterkt
- + Max. 170 kg



De **EasyBelt** heeft een afwasbare binnenzijde. Beter geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. Te reinigen met speciale reinigingsmiddelen.



De **FlexiBelt** heeft aan de binnenzijde een zachte polyester fluweellaag, waardoor deze een hoog draagcomfort heeft.

referentie	omschrijving maat / aantal handvatten	diameter cm
EBXS	Transfergordel EasyBelt XS / 5	45-70
EBS	Transfergordel EasyBelt S / 7	60-100
EBM	Transfergordel EasyBelt M / 9	70-120
EBL	Transfergordel EasyBelt L / 11	100-160
EBXL	Transfergordel EasyBelt XL / 13	115-175
FBS	Transfergordel FlexiBelt S / 7	60-100
FBM	Transfergordel FlexiBelt M / 9	70-120
FBL	Transfergordel FlexiBelt L / 11	100-160
FBXL	Transfergordel FlexiBelt XL / 13	115-175



Transfergordel ReadyBelt

De ReadyBelt is een ondersteuningsriem die ontworpen is om zorgvragers extra steun te bieden tijdens mobiliteitstraining en verschillende transfersituaties. De riem helpt zorgverleners om op een veilige en ergonomische manier ondersteuning te geven bij het opstaan en bij transfers, bijvoorbeeld van bed naar rolstoel of van rolstoel naar toilet of auto. Dankzij het comfortabele ontwerp en de stevige handgrepen kan de zorgverlener de zorgvrager beter begeleiden en een correcte werkhouding behouden.

- + Ondersteunt bij mobiliteitstraining en transfers
- + Ergonomische handgrepen voor een stevige en veilige grip
- + Antislip binnenzijde voorkomt dat de riem omhoog schuift
- + Zacht en comfortabel materiaal voor de gebruiker
- + Eenvoudig te sluiten en aan te passen rond taille of heupen
- + Verkrijgbaar in verschillende maten voor diverse zorgvragers



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm / aanbevolen gewicht	
TGRBS	Transfergordel ReadyBelt S, 7 handvatten	105 / 10 / 25-55 kg	60°
TGRBM	Transfergordel ReadyBelt M, 9 handvatten	120 / 10 / 50-75 kg	60°
TGRBL	Transfergordel ReadyBelt L, 11 handvatten	140 / 10 / 70-110 kg	60°

PantLock

PantLock wordt bevestigd rond de dij om te voorkomen dat de broek van de zorgvrager te ver naar beneden glijdt, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan het toilet. Hierdoor is het makkelijker voor de zorgvrager om te bukken en de omhoog te trekken.



referentie	omschrijving	
TGPL	PantLock 1 maat	60°

Beengordel

De beengordel wordt rond de benen en onder de knieën aangebracht door middel van een velcrosluiting. Dit geeft meer sterkte en steun bij het staan en rechtekomen. De sluiting is optimaal aanpasbaar dankzij de extra brede sluiting.

- + Extra steun bij staan en rechtekomen




referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm	
PMABG	Beengordel	100 / 22	60°

Transferband MagicBelt

De MagicBelt is uitgerust met een flexibele veiligheidsgordel die extra ondersteuning biedt aan de patiënt. De stevige handvatten zijn voorzien van speciale greephouders waardoor een comfortabelere en stevigere grip mogelijk is. De gordel heeft zowel korte als langere handgrepen. Dit garandeert voor elke situatie de meest ergonomische en veilige greep.

- + Binnenkant voorzien van antislip
- + Buitengedeelte vervaardigd uit vuilafstotend nylon
- + Binnenste gedeelte kan verwijderd worden.

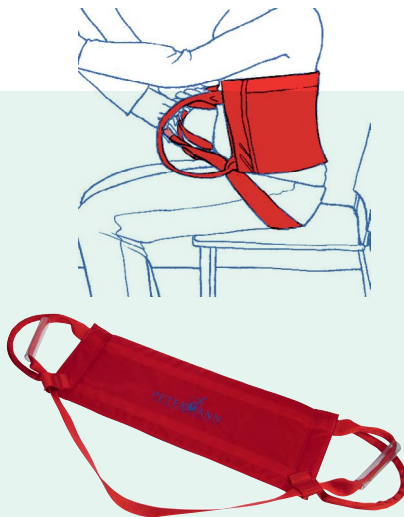

referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm / max. gewicht	
PMAFM	Transferband MagicBelt	65 / 25 / 200 kg	60°

Transferband FlexiMove

FlexiMove kent verschillende toepassingsgebieden: bijvoorbeeld als ondersteuningsmiddel wanneer iemand geholpen moet worden om op te staan van bed of stoel, als er hogerop in bed geplaatst moet worden, of bij het verplaatsen naar en van een rolstoel – in dat geval vaak in combinatie met een glijplank.



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm / max. gewicht	
TBFMN6020	Transferband FlexiMove Mini, waterafstotende nylon, 4 handgrepen	60 / 20 / 150 kg	60° €
TBFMF6020	Transferband FlexiMove Mini, polyester fluweel, 4 handgrepen	60 / 20 / 150 kg	60°

Draaischijf Turntable

De Turntable is een voetdraaischijf vervaardigd uit hard materiaal en is langs beide kanten uitgerust met antislipmateriaal.

- + ABS gecoate plastic
- + Diameter: 40 cm
- + Reinigen met een vochtige doek
- + Max 200 kg



referentie	omschrijving	diameter cm	
DSPMTT	Voetdraaischijf TurnTable	40	€

Oprichthulp Flexigrip

FlexiGrip is een eenvoudig hulpmiddel, waarmee iemand zichzelf omhoog kan trekken van een liggende naar zittende positie, wat ook de buik- en armspieren traint. De FlexiGrip kunt u ook gebruiken om iemand van rolstoel naar bed te helpen.



- + Met een lus makkelijk te bevestigen aan de onderkant of zijkant van het bed
- + Goede grip door de gevulde handvatten
- + Makkelijk te reinigen en te wassen
- + Max. 150 kg

referentie	omschrijving / aantal handvatten	lengte cm / breedte cm
FGR	Oprichthulp Flexigrip / 8	175 / 9



Voetensteun Alpha

De voetensteun Alpha helpt om hoogteverschillen te overbruggen bijv. tussen het bed en de rolstoel of toilet.



- + Vervaardigd uit polyethyleen
- + Wasbaar in lauw water
- + Max 200 kg

referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm / hoogte cm
PMAVS	Voetensteun Alpha	38 / 32 / 8,5



Voetensteun FootStool

FootStool wordt gebruikt om de knieën van de zorgvrager in een hogere positie te brengen om tijdens de transfers de druk van de bovenbenen te verminderen. FootStool biedt ook een uitstekende ondersteuning onder de voeten van de zorgvrager, voor een betere zitpositie tijdens een bezoek aan het toilet of als hij verder naar achteren verplaatst moet worden in een stoel of rolstoel.



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm / hoogte cm
VSFS10	Voetensteun FootStool	32 / 38 / 10
VSFS5	Voetensteun FootStool	32 / 38 / 5
VSFS10C	Voetensteun FootStool Cover met handvat	Voor VSFS10
VSFS5C	Voetensteun FootStool Cover met handvat	Voor VSFS5



Been- & armsteun Nurse Assistant

De Nurse Assistant ondersteunt een been of arm van een patiënt tijdens de verzorging. Zo ligt het te verzorgen onderdeel van betreffende lidmaat volledig vrij voor optimale bereikbaarheid tijdens de verzorging.




- + Vermindert de inspanningen bij de patiënt én de hulpverlener
- + Maakt het overbodig dat een extra hulpverlener het been vasthoudt terwijl de andere de verzorging uitvoert
- + Grote stabiliteit
- + De cover waar het been op rust is gemakkelijk verwisselbaar



referentie	omschrijving	lengte cm / breedte cm
NA30	Nurse Assistant been-/armsteun	39 / 39/ 30
NAC	Hoes voor Nurse Assistant	
NACD	Wegwerp hoes voor Nurse Assistant	



+
IN DE
KIJKER!
+

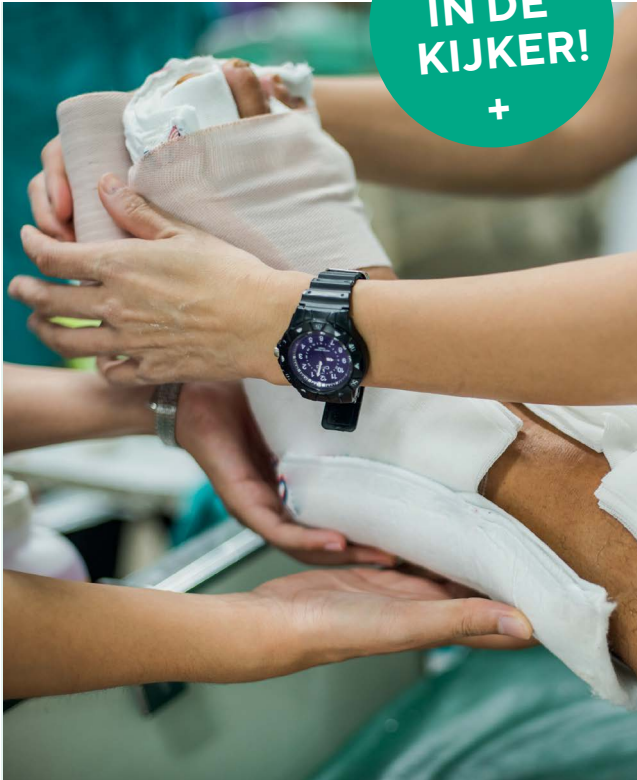

Handig hulpmiddel bij het verzorgen van een arm of been en bij het aantrekken van steunkousen in bed. De Nurse Assistant is ontwikkeld om de fysieke belasting van zorgverleners bij het verzorgen en verplegen van wonden, het zwachtelen van armen en ledematen en het aantrekken van steunkousen in bed te beperken. Met deze steun kunnen zorgverleners vanuit een betere positie werken. Het frame van de beensteun/armsteun is licht en bestaat uit inox.

Hij wordt geleverd met 1 wasbare en 1 disposable hoes. De wasbare hoezen kunnen bijgekocht worden per 10 stuks en de wegwerphoezen per 100 stuks.


+ Evacueren

Deze hulpmiddelen worden ingezet voor een snelle en veilige evacuatie van minder mobiele mensen (over meerdere verdiepingen) bijv. bij panne van liften of bij noodsituaties. Uit brandweerstatistieken blijkt dat 59% van de branden in woonzorgcentra ontstaan op de bewonerskamers. De wetgeving schrijft voor dat u een veilig evacuatiemiddel moet bieden aan personen die mogelijk niet in staat zijn om zelfstandig de noodroutes te gebruiken in geval van brand of een andere noodsituatie.



Evacuatiemat

De evacuatiemat laat een snelle en veilige evacuatie toe van bedlegerige personen. Ze wordt onder de matras gelegd en blijft daar permanent liggen. Bij een evacuatie wordt de bedlegerige persoon m.b.v. 2 gordels op de matras vastgegespt zodanig dat de matras een beschermende cocon rond de patiënt vormt. De hulpverleners gebruiken de evacuatiegordels aan het voet- en het hoofdeinde van de evacuatiemat om de matras samen met de persoon te verplaatsen van het bed over de grond en de trappen tot hij/zij in veiligheid gebracht is.

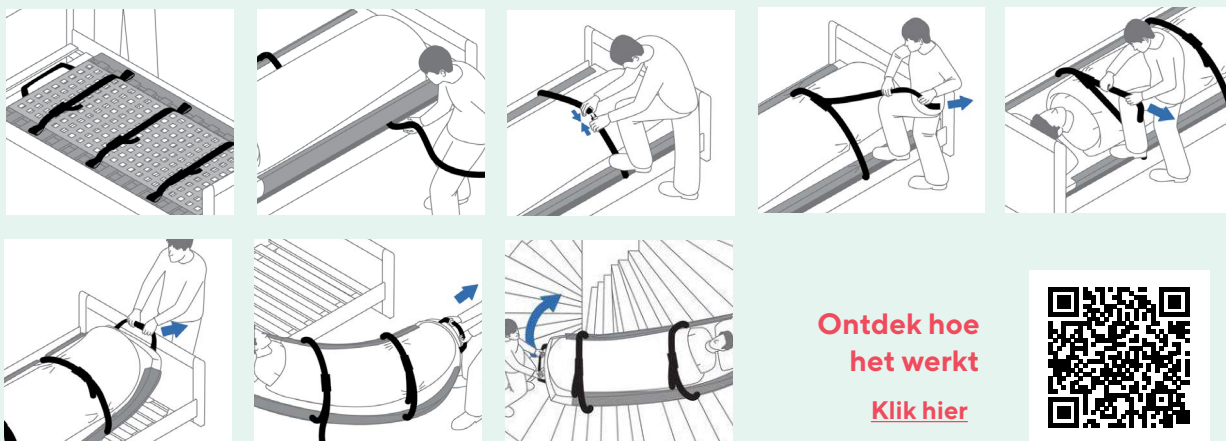

Ontdek hoe
het werkt
[Klik hier](#)



referentie	omschrijving / gewicht / kleur	bed lengte cm / breedte cm
EVACMS	Evacuatiemat 200x87x4 / 1710g / wit - Max. 200 kg	190 - 205 / 80 - 100
EVACM	Evacuatiemat 200x100x4 / 1920g / wit - Max. 200 kg	190 - 205 / 100 - 140



Transfermatras

zie pagina 18.

Draagstoel

zie pagina 21.

Evacuatiestoel

Deze hulpmiddelen worden ingezet voor een snelle en veilige evacuatie van minder mobiele mensen (over meerdere verdiepingen) bijv. bij panne van liften of bij noodsituaties. Uit brandweerstatistieken blijkt dat 59% van de branden in woonzorgcentra ontstaan op de bewonerskamers. De wetgeving schrijft voor dat u een veilig evacuatiemiddel moet bieden aan personen die mogelijk niet in staat zijn om zelfstandig de noodroutes te gebruiken in geval van brand of een andere noodsituatie.

Met 25 jaar ervaring is Exitmaster een vertrouwde expert in de sector die innovatieve evacuatiestoelen produceert en de beste ervaring voor bediener en passagier biedt. Wanneer liften in geval van nood niet kunnen worden gebruikt, heeft u Exitmaster-evacuatiestoelen nodig om iedereen veilig naar buiten te krijgen. Onze modellen zijn de veiligste, meest comfortabele, meest ergonomische en gemakkelijkst te gebruiken op de markt en worden geleverd met uitgebreide garanties, training en onderhoudsopties.

- + Rechtopstaand ontwerp met 4 wielen, slechts 1 operator nodig voor laden en rijden (muv ORIGINAL)
- + Ergonomisch en gebruiksvriendelijk met 'Free-walk'-ontwerp voor meer comfort voor de bediener
- + Handvatten voor gemakkelijker verplaatsen door gangen (VERSA Plus /Elite)
- + Armsteun voor extra passagierscomfort (VERSA Elite)
- + Voetsteun voor passagierscomfort
- + Vierpuntsgordel voor extra veiligheid van de passagiers (VERSA Elite)
- + Veiligheidsfunctie (rem) voor vertrouwen van bestuurder en passagier (VERSA/Plus/Elite)
- + Europese en internationale patenten en geregistreerde ontwerpen
- + Hellingsgraad trap tussen de 28° en 42°
- + Max 180 kg

Inbegrepen:

- + Voorzien van afdekhoes
- + Muur signalisatie
- + Wandmontagebeugel
- + Instructies

referentie	omschrijving	afmetingen (open) cm/ eigen gewicht
ESORGC	Evacuatiestoel "ORIGINAL"	49x88x136 / 12,15 kg
ESCEGO	Evacuatiestoel "EGO"	49x87x142 / 13,75 kg
ESVERSAC	Evacuatiestoel "VERSA"	49x90x159 / 14,4 kg
ESVERSACP	Evacuatiestoel "VERSA Plus" met handgrepen op naar boven te dragen	49x99x159 / 16,15 kg
ESELITEC	Evacuatiestoel "ELITE" met handgrepen op naar boven te dragen en 4 puntsgordel	49x99x159 / 17,7 kg
ESFS	Vrijstaande houder voor VERSA of ELITE	
ESSC	Evacuatiestoel opbergkast	115x62x31,5 / 24,5 kg
ESSTRAP	Hoofd- of beengordel voor EGO/VERSA of ELITE	



Ontdek hoe
het werkt



[Klik hier](#)

+ Opleidingen

Metra organiseert in samenwerking met onafhankelijke, gecertificeerde lesgevers op regelmatige tijdstippen opleidingen die er moeten toe bijdragen dat een betere zorg gecombineerd wordt met betere ergonomie.



De grote uitdaging zal er immers ook de komende jaren vooral uit bestaan om voldoende mensen te blijven vinden die het engagement om te werken in de zorgsector willen opnemen, ondanks stijgende werkdruk en de grote zorgnood bij patiënten en bewoners. Doordat de instroom de stijgende nood aan arbeidskrachten niet zal kunnen volgen, zullen zorgverleners overtuigd moeten worden om langer aan de slag te blijven. En dan zijn er ook nog de pensioenmaatregelen van de overheid, die ook beogen om mensen langer te laten werken. Het gebruik van transferhulpmiddelen, gecombineerd met de juiste opleidingen, kan hierbij een grote bijdrage leveren:

+ **Meer voldoening:** het zorgen volgens de juiste methode en met correcte hulpmiddelen resulteert in meer comfort en veiligheid voor de patiënt of bewoner. De waardering bij deze mensen zal stijgen, dus ook de voldoening bij de zorgverlener.

+ **Meer motivatie:** werknemers die in optimale omstandigheden hun job kunnen uitoefenen zijn meer gemotiveerd, zullen minder snel van sector of werkgever veranderen en ook als ze wat ouder zijn nog volop kunnen meedraaien.

+ **Minder ziekteverzuim:** ergonomisch werken zorgt voor minder fysieke belasting bij de zorgverlener, de kans om door letsels een tijd buiten strijd te zijn wordt veel kleiner. Het ziekteverzuim zal dus dalen.

+ **Efficiëntere zorg:** door het gebruik van de juiste hulpmiddelen kunnen heel wat zorgtaken door 1 persoon worden uitgevoerd, waar men nu vaak 2 mensen moet inzetten voor in se eenvoudige handelingen.



“Werkdruk in de zorg wint het té vaak van de juiste werkhouding. De juiste tiltechnieken en hulpmiddelen worden daar jammer genoeg niet steeds toegepast. Er wordt té dikwijls op de fysieke kracht (belastbaarheid) van de zorgverlener teruggevalen. Zo worden er telkens grenzen overschreden, wat nefast is voor het gestel, de vitaliteit en mettertijd ook de mentale gezondheid van de zorgverlener”

Permanent in ons aanbod: workshop ‘ergonomisch werken in de zorg’

Veilig verplaatsen van zorgbehoevenden

Doelgroep

+ Deze opleidingen richten zich naar zorgverlenend personeel (verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, ...) die hun kennis willen verruimen rond “correct gebruik van transferhulpmiddelen in de zorg”.

Doelstellingen

- + Kennis uitbreiden rond bestaande hulpmiddelen in de zorg
- + Correct gebruik van manuele en mechanische transferhulpmiddelen
- + Bewustwording van het eigen lichaam bij gebruik van hulpmiddelen
- + Onveilige situaties herkennen bij gebruik van transferhulpmiddelen
- + Comfort bieden aan de patiënt

Werkwijze

- + Participatieve en interactieve deelname van de kandidaten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
- + Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend
- + Evaluatie en groepsgesprek
- + Maximaal 12 deelnemers per workshop voor een optimale kennisoverdracht en participatie

Werken met manuele en mechanische transferhulpmiddelen (6 uur)

Inoefenen van verplaatsingen met behulp van transferhulpmiddelen

- + Patiënt hogerop brengen in bed
- + Patiënt draaien in bed
- + Horizontale translaties in bed
- + Comfortabel positioneren in bed

Gebruik van de actieve tillift

- + Voorwaarden om de actieve tillift veilig te kunnen gebruiken
- + Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de actieve tillift

Gebruik van de passieve tillift


- + Aanbevelingen bij gebruik van passieve tillift
- + Voordelen bij gebruik van passieve tillift met 2 zorgverleners
- + Correct aanbrengen en verwijderen van de tilband in lig en in zit
- + Correct positioneren in lig en in zit
- + Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de passieve tillift

Deze opleiding kan zowel in uw instelling als in de seminariezaal van Metra georganiseerd worden. Vraag meer info via academy@metra.be

Manuele transfer- hulpmiddelen



Ontdek al onze oplossingen op metra.be

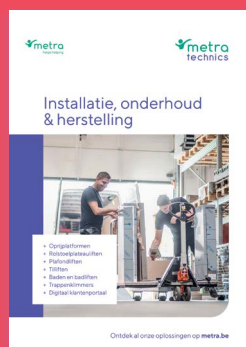

Manuele transferhulpmiddelen | Tilliften en tilbanden | Comfort, bescherming en veiligheid |
Douchen en baden | Medische fixatie | Ice Power | Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen | ...



METRA bv
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent | België

+32 (0)9 227 71 74
info@metra.be
metra.be

BTW BE 0458.474.359
RPR Gent | AFDELING Gent



© Metra bv - maart 2026 - Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten.